


Agulha de biópsia pleural COPE

Esta agulha reutilizável foi desenvolvida para a remoção de pequena quantidade de pleura para estudo histopatológico. Consiste em 5 peças incluindo uma cânula externa de calibre 11G com um limitador de profundidade; uma agulha interna de 13G biselada com estilete; um mandril de 13G com gancho para coleta de amostra. Na medida de 11G x 3" ou equivalente a 80 x 3.0mm.

Características:

- ✓ Consiste em 5 partes metálicas;
- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Mandril interno com gancho para remoção de amostra;

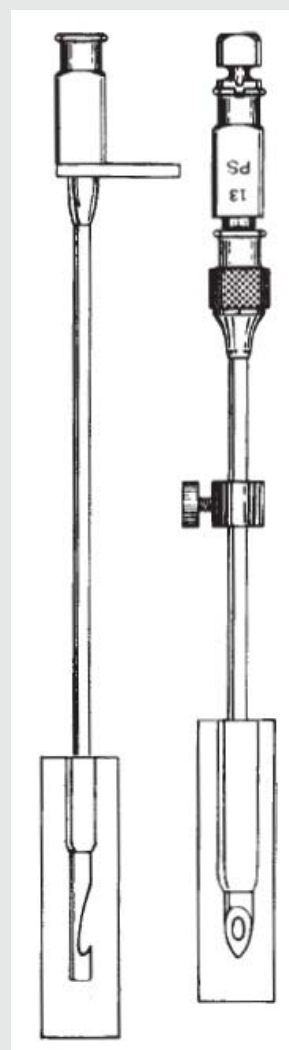

Agulha COPE

Agulha de biópsia pleural COPE Caixa com 01		
Número de catálogo	Calibre em Ga (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
7603	11g (3,0)	3" (80)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br